

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ZERTS Multifunction®

для диагностики, терапии и хирургии
различных ЛОР-заболеваний

WWW.ZERTS.RU



ЛОР-комбайны серии ZET

- ✓ Лор-установки ZERTS Multifunction серии ZET – недорогие компактные рабочие станции с набором необходимого оборудования для эффективного оснащения кабинета ЛОР-врача



ZERTS



ZERTS

Многофункциональный Комплекс
ZERTS Multifunction®

ЛОР-КОМБАЙН ZET

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР-врача

- Подключение к системе центрального водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус
- Верхняя консоль с прозрачной крышкой и лотками для инструментов
- Система промывания уха с автоматическим контролем t^0 промывной воды
- Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума и ушной воронкой
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- Функциональный держатель распылителей и аспирационной воронки
- Система сжатого воздуха с регулировкой давления от 0 до 2,5 бар

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
- 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
- Система фильтрации воды
- Источник холодного света универсальный (светодиодный) на 1 эндоскоп



ZET

500x500x1025мм

ЛОР-КОМБАЙН ZET Plus

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР-врача

- Подключение к системе центрального водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя


ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус
- Верхняя консоль с прозрачной крышкой и лотками для инструментов
- Система промывания уха с автоматическим контролем t° промывной воды
- Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума и ушной воронкой
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- Функциональный держатель распылителей и аспирационной воронки
- Система сжатого воздуха с регулировкой давления от 0 до 2,5 бар
- 2 эргономичных ящика для хранения инструментов
- 1 глубокий ящик для хранения инструментов и расходных материалов



- 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
- 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
- Система фильтрации и очистки воды (подключение к стационарной водопроводной системе)
- Источник холодного света универсальный (светодиодный) на 1 эндоскоп
- Моноблок к блоку комбайна (в комплекте кронштейн)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

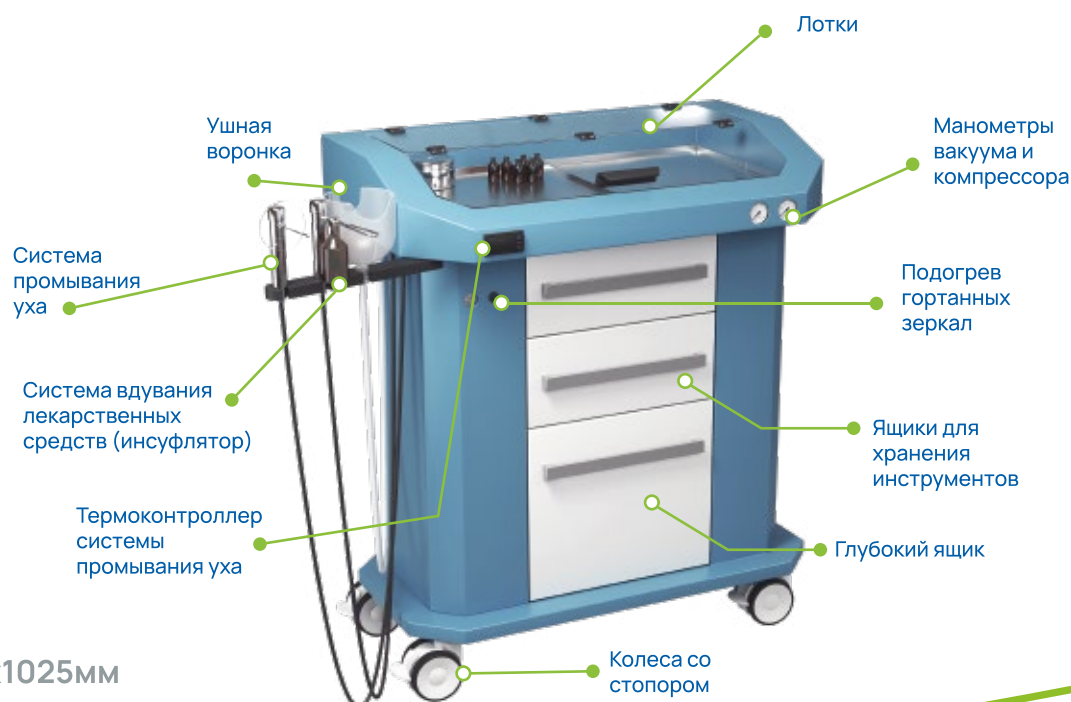

ZET Plus

870x500x1025мм



ZERTS

Многофункциональный Комплекс
ZERTS Multifunction®

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ZET IRI



- Металлический корпус
- Система промывания уха с автоматическим контролем температуры промывной воды
- Функциональный держатель водяного пистолета
- Подключение к стационарной водопроводной системе (в комплект входит редуктор и клапан безопасности)

Функция промывки входит в базовую комплектацию
всех ЛОР-комбайнов ZERTS!

Модуль ZET iri – нужен, если вы приобрели комбайн другого
производителя и у вас нет этой функции

ОПЦИИ ДЛЯ ЛОР-КОМБАЙНОВ

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ И ОЧИСТКИ ВОДЫ



Обязательная опция для сохранения гарантии на систему
промывания уха. Устанавливается на стену рядом
с комбайном.

ВИДЕОКАМЕРА МЕДИЦИНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЖЁСТКИХ И ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ



Предназначена для возможности фото- и видеодокументации
производимых исследований. Подключается напрямую
к компьютеру через разъём USB 3.0. Есть свой светодиодный
источник света для подключения к эндоскопу. Разрешение FULL
HD.

ОПЦИИ ДЛЯ ЛОР-КОМБАЙНОВ


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НЁБНЫХ МИНДАЛИН С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМА



Используется совместно с аспиратором жидкости, установленным в ЛОР-комбайн. В состав устройства входит:

- Рукоятка со сменными насадками. В рукоятке есть отверстие, при перекрытии которого создается вакуум, и устройство начинает свою работу
- Банка объёмом 1 литр для лекарственного промывающего раствора
- Шланги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЛИКОНОВЫХ КОЛПАЧКОВ УСТРОЙСТВА ПРОМЫВАНИЯ НЁБНЫХ МИНДАЛИН

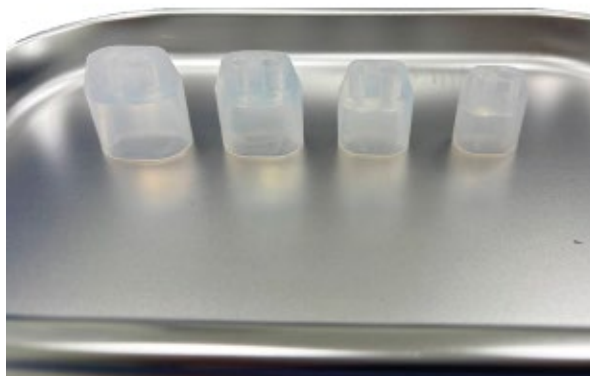

Сменные насадки из автоклавируемого силикона

ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ ОТСОСА И ОЛИВЫ ПОЛИТЦЕРА (КУКУШКА)



Система подключается к аспиратору жидкости комбайна. Состоит из:

- Олив Политцера (3 размера)
- Металлического переходника
- Шланга для подключения к аспиратору жидкости

КОННЕКТОР БЫСТРОСЪЁМНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОЗДУШНОМУ ПИСТОЛЕТУ И РАСПЫЛИТЕЛЮ ОЛИВ ПОЛИТЦЕРА



Состоит из олив Политцера в трёх размерах и металлического переходника для подключения к воздушному пистолету




ZERTS

Многофункциональный Комплекс
ZERTS Multifunction®

ОПЦИИ ДЛЯ ЛОР-КОМБАЙНОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ ГИБКОГО ЭНДСКОПА

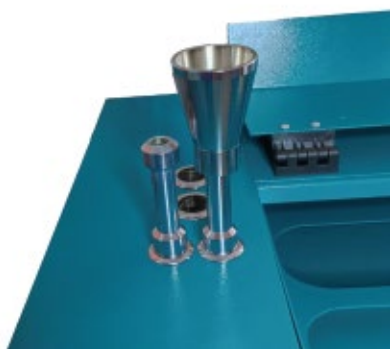

Представляет собой металлическую воронку, установленную на колчан для подогрева эндоскопов

КОННЕКТОР БЫСТРОСЪЁМНЫЙ ДЛЯ НОСИКА ВОДЯНОГО ПИСТОЛЕТА



Для возможности быстрого снятия носика водяного пистолета для его замены или дезинфекции

ДЕРЖАТЕЛЬ НАЛОБНОЙ ЛАМПЫ



Изготовлен из металла, установлен на боковую поверхность комбайна

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНОБЛОКА К БЛОКУ КОМБАЙНА (ТОЛЬКО ДЛЯ ZET PLUS)



Кронштейн крепится к задней стенке комбайна. Держатель моноблока с возможностью изменения угла поворота и наклона

МОНОБЛОК К БЛОКУ КОМБАЙНА (В КОМПЛЕКТЕ КРОНШТЕЙН) (ТОЛЬКО ДЛЯ ZET PLUS)



Полноценный компьютер для визуализации эндоскопических исследований



ОПЦИИ ДЛЯ ЛОР-КОМБАЙНОВ

КОЛЧАНЫ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ
И ПОДОГРЕВА
ЭНДОСКОПОВ ДЛЯ
КОМБАЙНОВ СЕРИИ ZET



1 металлический колчан для подогрева эндоскопа, 1 стеклянный колчан для раствора для дезинфекции эндоскопа.

ИСТОЧНИК
ХОЛОДНОГО СВЕТА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(СВЕТОДИОДНЫЙ)
НА 1 ЭНДОСКОП



Подключается к USB порту
под столешницей комбайна

ШТАТНЫЙ ПОДВЕС
ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ
ЭНДОСКОПА



Изготовлен из пластика,
установлен на боковую
поверхность комбайна

ОКРАСКА КОМБАЙНА В НЕСТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ПО ПАЛИТРЕ RAL

Возможность подобрать любой цвет комбайна по палитре RAL



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



5024



5010



4005



6021



7042



1001



6019



6018



5021

**МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ**



ZERTS